

Plexx[®] Plus

Made in Italy

O AVANÇO DO PLASMA PARA
MÚLTIPLOS TRATAMENTOS



**A Evolução do PLASMA
a serviço da sua beleza!**

ANVISA 81312380002





Plexx[®]
Made in Italy Plus

O AVANÇO DO PLASMA PARA MÚLTIPLOS TRATAMENTOS

- Blefaroplastia Não Cirúrgica
 - Rejuvenescimento Periorbital
 - Acne Ativa
 - Cicatrizes de Acne
 - Lesões de Pele
 - Hiperqueratose
 - Angiomas de Rubi
 - Verrugas
 - Xantelasma
 - Cistos
 - Queloides
 - Lifting Facial, Pescoço e Corporal
 - Rugas
 - Lentigo Solares
 - Vulvoplastia
 - Elastose
 - Discromia
 - Rejuvenescimento Vaginal
- E muito mais!

PLASMA

PLEXR: O AVANÇO DO PLASMA NA MEDICINA

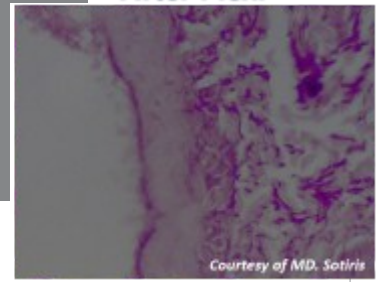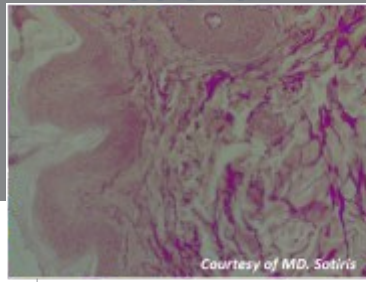

Histologia: A mesma área mostra o encolhimento das fibras elásticas x200

A **HV Medical** apresenta uma verdadeira evolução para procedimentos de cirurgia minimamente invasiva: **PLEXR** – um Gerador Eletrônico de Plasma que explora a ionização dos gases presentes no ar, gerando um pequeno arco elétrico que atua no nível do tecido superficial, causando a sublimação sem causar danos aos tecidos circundantes. Assim realiza os procedimentos sem incisões, sem pontos, sem cicatrizes, sem complicações e o paciente pode voltar imediatamente a sua rotina após o procedimento.




Blefaroplastia Não Cirúrgica



Rejuvenescimento Periorbital




Acne

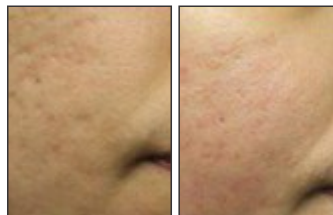

Verruga



Retração da Pele

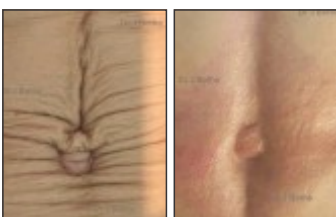

Cisto




Queratose



Cicatriz



Lifting Não Cirúrgico

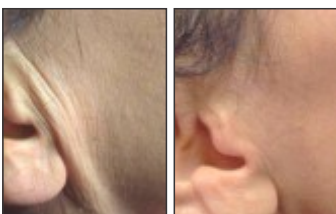



Rejuv. Vaginal



Código de Barras



Xantelasma

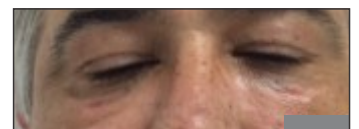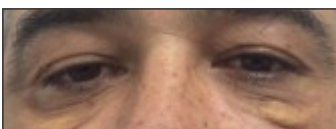

O que é o Plasma?

Considerado como o 4º estágio da matéria, quando gerado ele realiza a sublimação, que é a transição direta do estado sólido da matéria para o gasoso sem passar pelo estado líquido, desta forma realiza a eliminação do excesso da pele sem causar danos aos tecidos adjacentes e à lâmina basal, sem causar uofibrose necrose.

Através da sublimação dos corneócitos (parte mais externa na pele) realiza a retração dos tecidos pela transferência de calor seletivo, proporciona a regeneração do estrato córneo, estimulação da derme e (fibroblastos) assim, a produção de novo colágeno do tipo III. Na aplicação, o edfluxoions não se espalha profundamente, desta forma mantém a lâmina basal preservada assim como não gera danos para a derme.

O PLEXR realiza a blefaroplastia não cirúrgica: remoção de rugas e anflacidez região dos olhos, rejuvenescimento periorbital e muito mais: lifting de bochechas, pescoço e buço, remoção de quelóides, xantelasma, manchas senis, acne ativa, cicatrizes, verrugas, tatuagem, rejuvenescimento íntimo interno e externo e muito mais.

O equipamento é portátil, tela touch screen e 3 Aplicadores Wireless diferentes, com bateria de longa autonomia e potências diferentes, o que possibilita uma ampla gama de tratamentos com a parametrização correta.



A GMV recomenda e enfatiza o uso apenas de ponteiros oficiais do Plexr.

Esses tipos de agulhas, fabricadas com aço inoxidável de grau médico, são concebidas para funcionar em conjunto com os aplicadores da Plexr: elas foram estudadas e projetadas para gerar a quantidade correta de plasma.



Aplicador com botão Branco: Blefaroplastia, lentigo solares, acne ativa moderada, pequenas rugas, lifting umbilical, pequenas neoformações benignas da pele, pequenos quelóides, renovação cutânea moderada e rejuvenescimento da pele, rejuvenescimento vaginal e vulvoplastia.

Aplicador com botão Verde: Acne ativa, neoformações cutâneas benignas médias, queratose seborreica, elastose, discromia, pequenos angiomas de rubi, lifting facial, xantelasma, pequenos fibromas e pequenas cicatrizes.

Aplicador com botão Vermelho: Neoformações benignas volumosas da pele, grandes fibromas, grandes angiomas de rubi, cicatrizes profundas, cicatrizes de acne, rejuvenescimento, verrugas, verrugas seborreicas e hiperqueratose.

Equipamento com 3 anos de Garantia!