

FemTouch™

on AcuPulse™

360°

de saúde vaginal



FemTouch™:

A solução 360°

para condições relacionadas à saúde vaginal

Uma colaboração mútua com os principais especialistas resultou no desenvolvimento do FemTouch - um tratamento a laser vaginal impulsionado pelos profissionais e pelas necessidades das mulheres

Como o FemTouch vai beneficiar seus pacientes?

Os tratamentos com laser CO₂ têm demonstrado promover a restauração da fisiologia do canal vaginal para um estágio semelhante ao da pré-menopausa e para a redução dos sintomas de envelhecimento vulvovaginal que são acompanhados por atrofia vaginal e incontinência.



“Minhas pacientes com menopausa são muito gratas por ajudar a restaurar suas vidas sexuais e aliviar sua secura vaginal. Uma paciente disse que se sentiu com 19 de novo!”

Dr. Scott Eder, GYN, NJ, USA



EFICIENTE

Apenas 2-4 tratamentos necessários para resultados ideais



SEM COMPLICAÇÕES

Sem tempo de inatividade ou cuidados pós-procedimento necessários



RÁPIDO

Procedimento confortável de IPT e OPT com duração de apenas alguns minutos



VERSÁTIL


Combinado com AcuPulse para várias indicações estéticas e ginecológicas

Como funciona o FemTouch?

FemTouch trata as condições relacionadas à saúde vaginal, promovendo a remodelação da mucosa vaginal. O laser de CO₂ fracionado é aplicado em 360 ° ao longo do canal vaginal, o que resulta em uma microablação muito suave do revestimento vaginal.

O nível de energia de 7,5mJ - 12,5mJ utilizado trabalhando com FemTouch garante que o efeito clínico desejável seja alcançado enquanto a camada fibro-muscular permanece intacta.

Efeito histológico na mucosa vaginal* - profundidade de impacto 200-500 µm

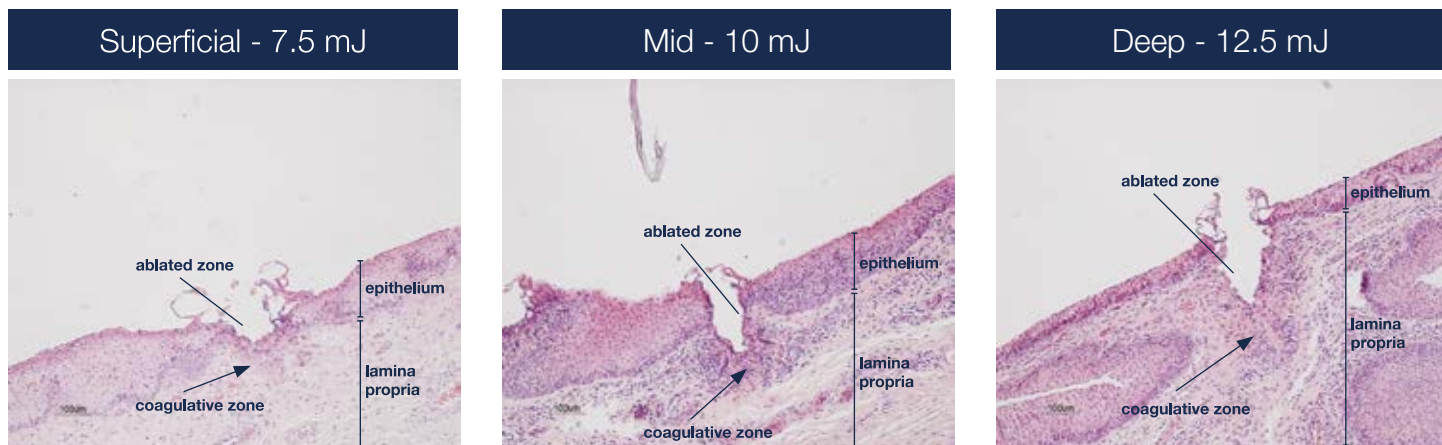

Histologias mostram a profundidade total de penetração (ablação e coagulação) em vários níveis de energia dos tratamentos AcuPulse na parede vaginal, usando FemTouch.

* Estudo com ex-vivo suíno

A família de produtos AcuPulse é uma linha abrangente de sistemas de laser CO₂ com os quais sua prática pode crescer.

A ampla gama de acessórios e indicações clínicas tornam a linha de produtos AcuPulse flexível e econômica.

A família de lasers AcuPulse estende suas capacidades de desempenho para tratar um conjunto mais amplo de aplicações clínicas, bem como mais pacientes, nos segmentos de ginecologia e estética.

Ginecologia

Quando se trata de operar anatomia delicada, visando ao mínimo dano térmico, a tecnologia do laser Lumenis CO₂ é considerada superior entre os principais ginecologistas em todo o mundo.

Colposcopia e abordagem vaginal

- › Neoplasia intraepitelial cervical (NIC)
- › Leucoplasia
- › Condiloma
- › Tumores benignos e malignos
- › Resurfacing vaginal e vulvar

Abordagem laparoscópica

- › Endometriose
- › Aderências
- › Miomas
- › Cistos
- › Histerectomia

Estética

AcuPulse tem uma estação de trabalho de recapeamento ablativo completa, com tecnologia superior para todas as necessidades de recapeamento estético.

- › Resurfacing da pele
- › Cicatrizes de acne
- › Discromia
- › Textura irregular
- › Ceratose actínica
- › Linhas e rugas
- › Pigmentação irregular
- › Sulcos na pele

Quase **50%** das mulheres na pós-menopausa sofrem de incontinência urinária¹ de esforço e quase **80%** sofrem de atrofia vaginal²

“Estou animado para adicionar o tratamento FemTouch à minha prática, pois este procedimento confortável e fácil estava demonstrando grande satisfação com meus pacientes.

Esta tecnologia leva a bons resultados clínicos e posso expandir sua utilização para indicações ginecológicas adicionais.”

Dr. Massimiliano Marziali, ginecologista, Roma, Itália



Faça seus pacientes

Rirem, Amarem, Viverem

Especificações do FemTouch

Laser source	CO ₂
Wavelength	10,600 nm
Power mode	Continuous Wave (CW)
Laser delivery	Fractional
Pulse mode	Single, Repeat
Energy	7.5-12.5mJ
Density	3-25%
Certifications and approvals	Lumenis is ISO 13485:2012 certified, FemTouch on AcuPulse is CE approved and FDA cleared
Compatible with	All AcuPulse and AcuPulse DUO models (except 40 WG)

¹ Melville JL. Urinary Incontinence in US Women, A Population-Based Study. Arch Intern Med. 2005. ² Simon JA. et al. Vaginal health in the United States: results from the vaginal health: insights, views & attitudes survey. Menopause (10) p1043-1048, 2013.



Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1277 - São Paulo/SP
contato@hv.com.br

(11) 3549-2855
(11) 99147-9248 ☎

www.HV.com.br

f /hvlaser @hvlaser